


First Aid Eye Wash

TD-1451, Aurena Eye Wash

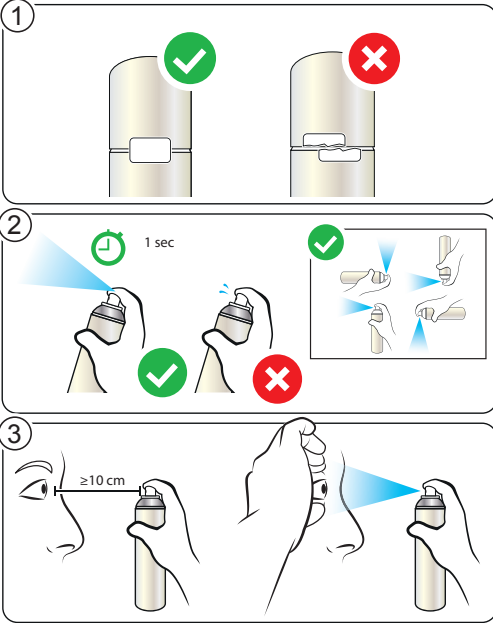

(en) Recommended rinsing time: >15 min. Rinsing time for this product: ≥13 min.
(sv) Rekommenderad spottid: >15 min. Spottid för denna produkt: ≥13 min.

(en) Intended use:
Sterile isotonic saline solution for rinsing/cleansing of the eye as first aid treatment.
Target user: For all ages. To be used in institutions and workplaces without technical experiences or training. Can be used with contact lenses.

Storage:
Store between 15°C and 30°C, for comfortable use.
Storage/transport temperature: -20°C to 40°C.

Disposal:
Follow local regulations for safe disposal of pressurized containers.

Precautions:

- Seek medical attention if condition persists or gets worse.
- If any serious incident occurs in relation to the device, report to the local competent authority and the manufacturer.

Warning:

- Pressurised container. May burst if heated.
- Do not pierce or burn, even after use.
- Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.
- Protect from sunlight.
- Keep out of reach of children.

(sv) Avsedd användning:
Steril isoton saltlösning för sköljning/rengöring av ögat som första hjälpen behandling.
Målgrupp:
För alla åldrar. Kan användas på institutioner och arbetsplatser utan teknisk erfarenhet eller utbildning. Kan användas med kontaktlinser.

Förvarning:
Förvara mellan 15°C och 30°C, för bekväm användning.
Förvaring/transporttemperatur: -20°C till 40°C.


Källsortering:
Ej i lokala föreskrifter för säkert bortskaflande av trycksatt behållare.

Försiktighetsåtgärder:

- Sök läkarvård om tillståndet kvarstår eller förvärras.
- Om någon allvarig händelse inträffar i samband med produkten, rapportera till den lokala behöriga myndigheten och tillverkaren.

Varning:

- Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
- Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.
- Skyddas från solljus.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

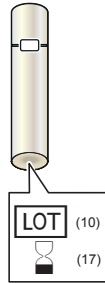

3

CE 2 8 6 2 STERILE R

Aurena Laboratories AB
Fjärrviksvägen 22,
SE-653 50 Karlstad
Sweden/Sverige



REF 2003-1

MD

250 ml

405

+ First Aid Eye Wash



STERILE SALINE EYE WASH
Sodium Chloride Solution (0.9% NaCl)

STERIL ÖGONDUSCH
Koksaltlösning (0,9% NaCl)


Distributör/Distributör:
XXXX

(01) XXXXXXXXXXXXXC



First Aid Eye Wash

TD-1452, Aurena Eye Wash

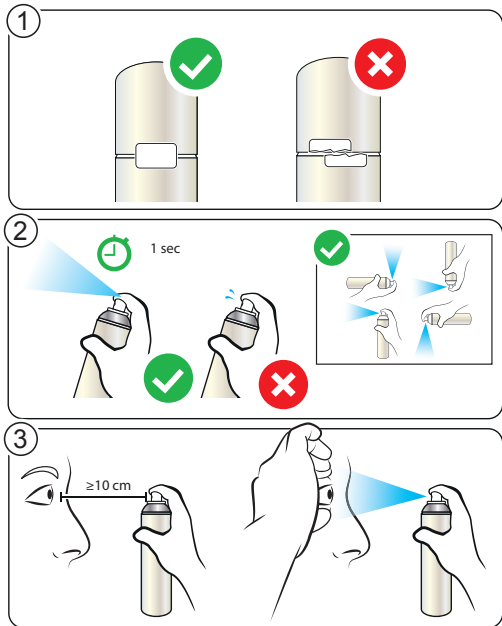

(en) Recommended rinsing time: >15 min. Rinsing time for this product: ≥13 min.
(sv) Rekommenderad spoltid: >15 min. Spoltid för denna produkt: ≥13 min.

(en) Intended use:
Sterile isotonic saline solution for rinsing/cleansing of the eye as first aid treatment.
Target user: For all ages. To be used in institutions and workplaces without technical experiences or training. Can be used with contact lenses.

Storage:
Store between 15°C and 30°C, for comfortable use.
Storage/transport temperature: -20°C to 40°C.

Disposal:
Follow local regulations for safe disposal of pressurized containers.

Precautions:

- Seek medical attention if condition persists or gets worse.
- If any serious incident occurs in relation to the device, report to the local competent authority and the manufacturer.

Warning:

- Pressurised container: May burst if heated.
- Do not pierce or burn, even after use.
- Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.
- Protect from sunlight.
- Keep out of reach of children.

(sv) Avsedd användning:
Steril isoton saltlösning för sköjning/rengöring av ögat som första hjälpen behandling.
Målgrupp:
För alla åldrar. Kan användas på institutioner och arbetsplatser utan teknisk erfarenhet eller utbildning. Kan användas med kontaktlinser.

Förvaring:
Förvara mellan 15°C och 30°C, för bekväm användning.
Förvaring/transporttemperatur: -20°C till 40°C.


Källsortering:
Följ lokala föreskrifter för säkert bortskaffande av trycksatt behållare.

Företsaktighetsåtgärder:

- Sök läkarvård om tillståndet kvarstår eller förvärras.
- Om någon allvarig händelse inträffar i samband med produkten, rapportera till den lokala behöriga myndigheten och tillverkaren.

Varning:

- Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
- Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra användningskällor. Rökning förbjuden.
- Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.
- Skyddas från solljus.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

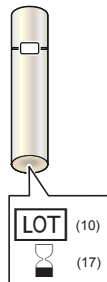

3



STERILE R

2 8 6 2



Aurena Laboratories AB
Fjärrviksvägen 22,
SE-653 50 Karlstad
Sweden/Sverige



REF 2003-2

MD

250 ml

405

+ First Aid Eye Wash



STERILE SALINE EYE WASH
Phosphate Buffered Sodium Chloride
Solution (0.9% NaCl)

STERIL ÖGONDUSCH
Fosfatbuffrad Koksaltlösning (0,9% NaCl)

Distributör/Distributör:
XXXX



(01) XXXXXXXXXXXXXC

